


High Flow Family

Cewniki krótkotermiowe do dializoterapii




 medical products
developed and produced
exclusively in Germany

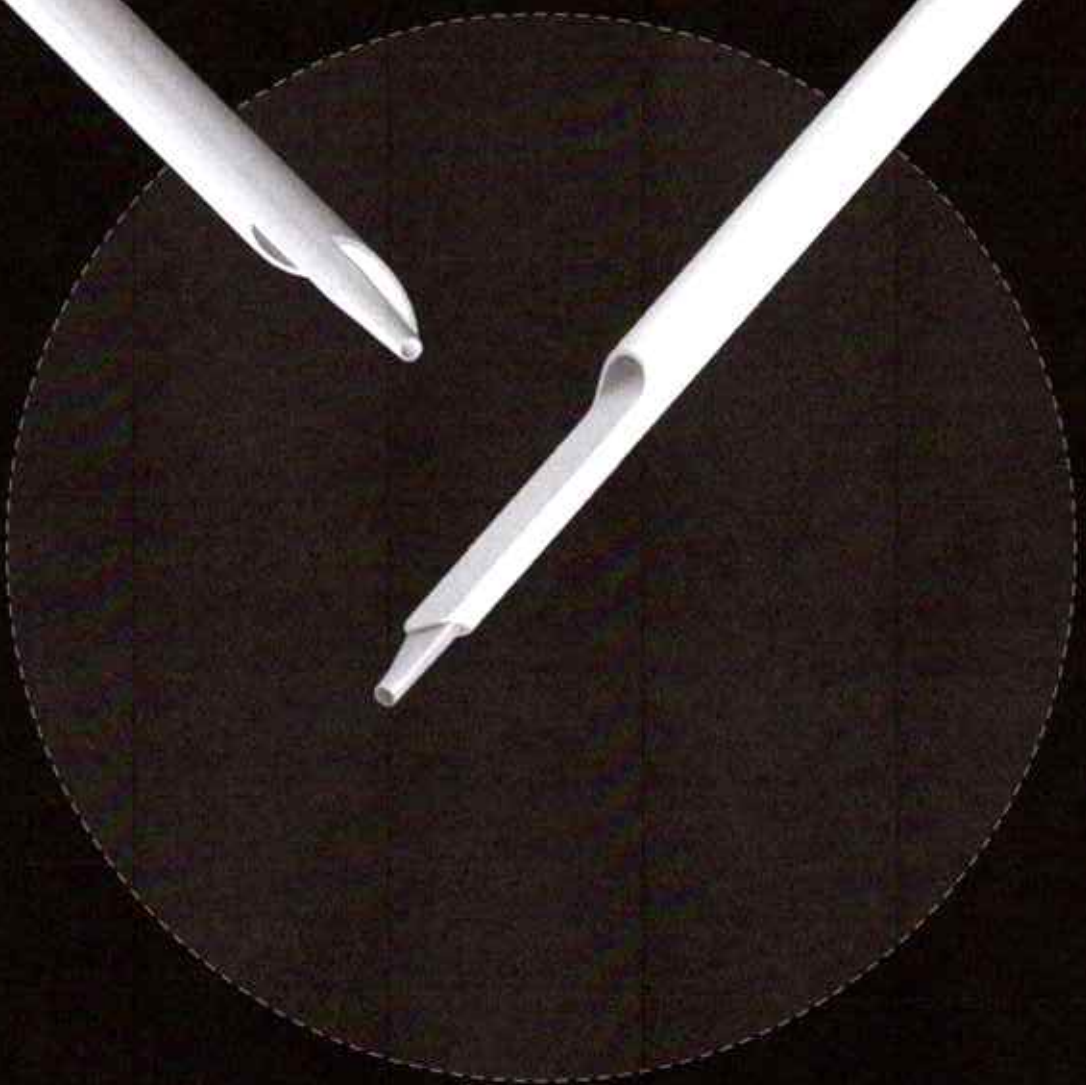

High Flow Triple Lumen (Potrójne światło)

13,5 Fr

medical products
developed and produced
exclusively in Germany

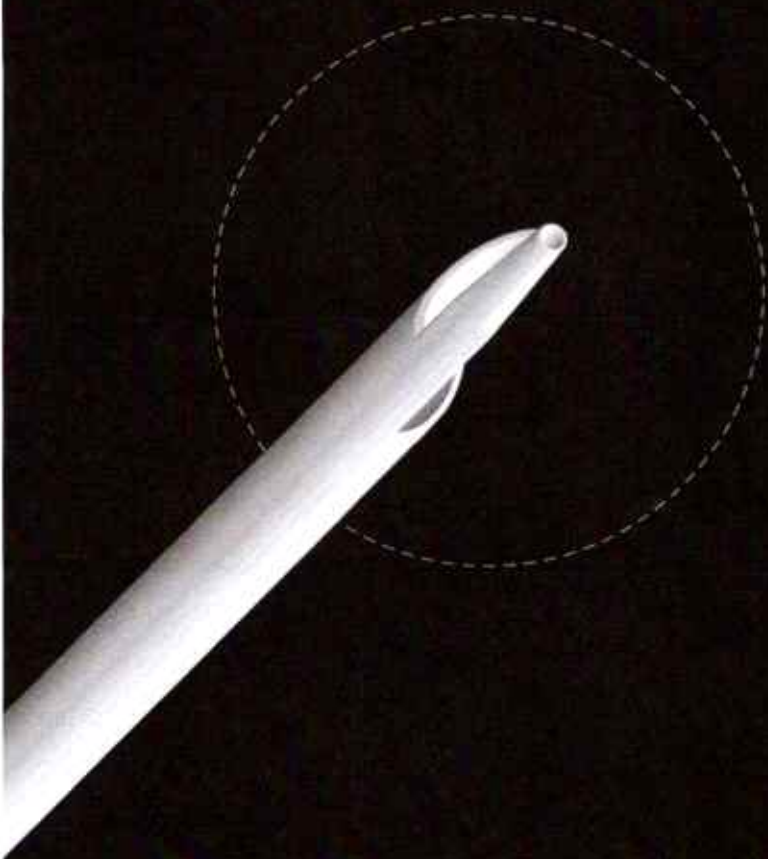

Końcówka o unikalnym kształcie
przewyższa klasyczny model z
otworem bocznym:

- Ryzyko zakrzepicy jest znacząco obniżone
- Ryzyko przylegania do ścian naczyń jest znacząco obniżone
- Mniej komplikacji z zakażeniami bakteryjnymi oraz w sepsie
- Łatwe wprowadzanie dzięki stożkowej końcówce



Szerokie światło wewnętrzne:

- Wysoki przepływ krwi
- Większa elastyczność w zakresie prędkości pompy: możliwe ustawienie niższego ciśnienia

Trzecie światło:

- Podawanie płynów, podawanie leków wazoaktywnych, leczenie żywieniowe drogą dożylną, pobieranie krwi

High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr

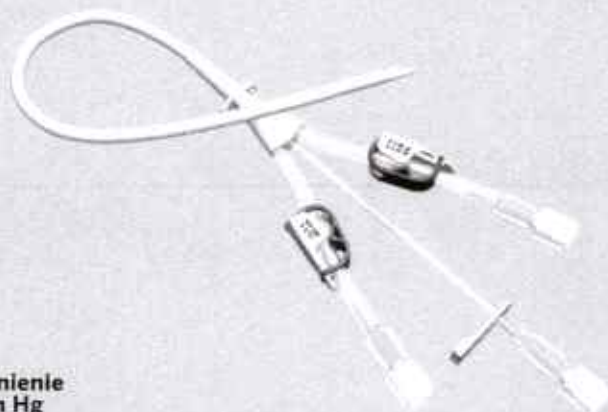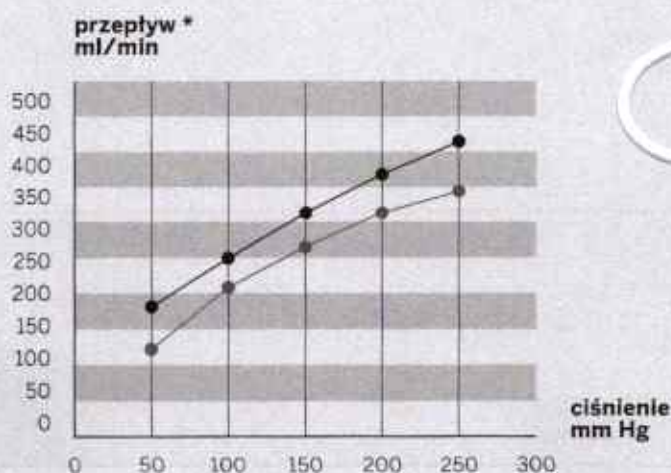

* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi

High Flow Double Lumen (Podwójne światło)

11 Fr i 13 Fr

Fabrycznie załadowany mandryn:
Proste i atraumatyczne zakładanie

11 Fr

Nowy kształt do powolnych dializ
w nagłych przypadkach:

- Nowe światło 11 Fr umożliwia odpowiedni przepływ krwi i niższe wskaźniki ciśnienia

Specjalnie zaprojektowana
końcówka:

- Zmniejsza ryzyko uszkodzeń przy implantacji
- Przednie otwory zmniejszają ryzyko zakrzepów
- Znacznie zmniejszone ryzyko przylegania do ściany naczynia




13 Fr

Optymalny kształt dla szybkich dializ
w nagłych przypadkach:


- Szersze wewnętrzne średnice zapewniają idealne wskaźniki przepływu
- Większa elastyczność w zakresie prędkości pompy: możliwe ustawienie niższego ciśnienia

Końcówka cewnika bez bocznych otworów:

- Zmniejszone ryzyko zakrzepów

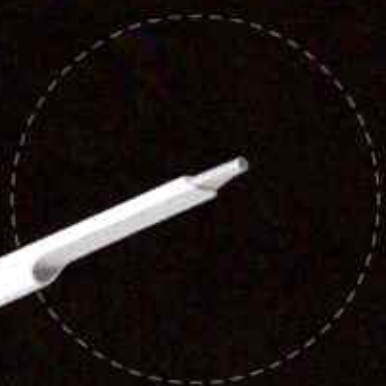

High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr i 13 Fr

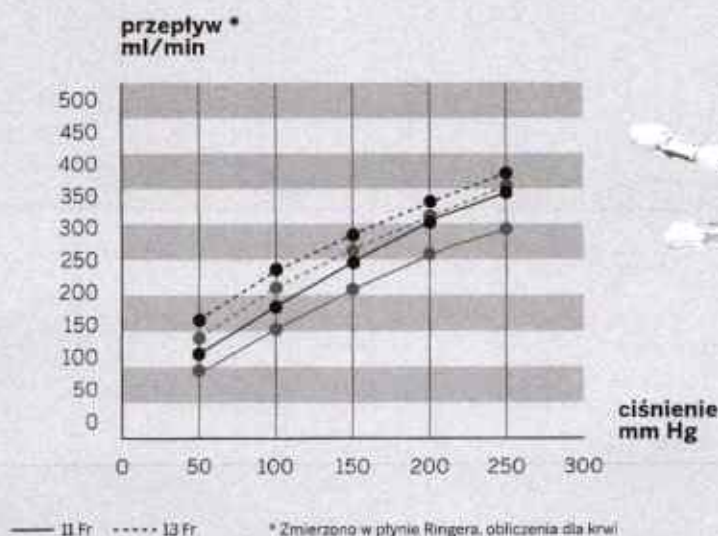


Pozostałe zalety cewników High Flow

- Termoplastyczny poliuretan Tecoflex®:
Po założeniu sztaft i końcówka cewnika miękną,
zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia
ścian naczyniowych
- Radiocieniujący sztaft cewnika: zapewnia
widoczność w RTG
- Obrótowy pierścień do szycia pozwala uniknąć
podrażnień skóry
- Zaciski bezpieczeństwa z zabezpieczeniami
bocznymi, chroniące rurkę ramienia przed
wyślizgnięciem się. Wskaźnik wypełnienia,
rozmiar i długość wg francuskiej skali, trwały
nadruk wysokiej jakości.
- Kompatybilny z MRI

Wszystkie zestawy zawierają

Przykładowy zestaw High Flow Double Lumen 13 Fr (Podwójne światło)

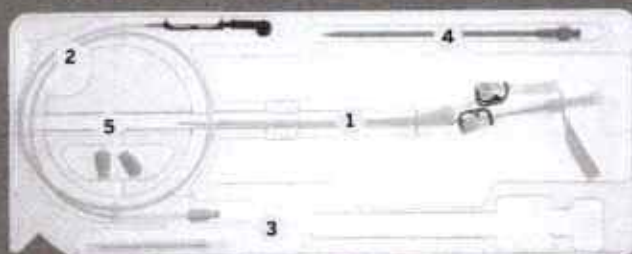

- 1 Cewnik
- 2 Odporna na odkształcenia prowadnica
w kształcie "J"
- 3 Igła wprowadzająca 18 mm
- 4 Rozszerzacz
- 5 Nasadki iniecyjne Luer Lock

Odporna na odkształcenia prowadnica

Nowa generacja prowadnic z nitinolu do metody Seldingera

Wysoka zawartość tytanu zapewnia wyjątkowo wysoką
elastyczność i odporność na odkształcenia. Dodatkowy
komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje
gładką powierzchnię i najwyższy poślizg.



High Flow Family

medical products
developed and produced
exclusively in Germany

Specyfikacja produktu

High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr

Proste ramiona

Proste ramiona		Zagięte ramiona		Ilość w pudełku
Produkt nr	Długość (mm)	Produkt nr	Długość (mm)	
PKTHF13P150	150	PKTHF13P150R	150	5
PKTHF13P175	175	PKTHF13P175R	175	5
PKTHF13P200	200	PKTHF13P200R	200	5
PKTHF13P250	250	PKTHF13P250R	250	5



High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr

Zagięte ramiona

Proste ramiona		Zagięte ramiona		Ilość w pudełku
Produkt nr	Długość (mm)	Produkt nr	Długość (mm)	
PKHF11P150	150	PKHF11P150R	150	3
PKHF11P175	175	PKHF11P175R	175	3
PKHF11P200	200	PKHF11P200R	200	3
PKHF11P250	250	PKHF11P250R	250	3



High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 13 Fr

Proste ramiona		Zagięte ramiona		Ilość w pudełku
Produkt nr	Długość (mm)	Produkt nr	Długość (mm)	
PKHF13PH150	150	PKHF13PH150R	150	3
PKHF13PH175	175	PKHF13PH175R	175	3
PKHF13PH200	200	PKHF13PH200R	200	3
PKHF13PH250	250	PKHF13PH250R	250	3
PKHF13PH300	300	-	-	3